

SCHEDA TECNICA OPTIMA CLHEEL



TUTORE GAMBA-PIEDE ALTO CON APERTURA AL TALLONE.

Trattamento dell'ulcera diabetica del tallone, della lesione/ulcera da decubito del tallone, della lesione/trauma del tallone/tendine.

COMPONENTI DEL PRODOTTO

- 1- Gambale
- 2- Fodera
- 3- Soletto
- 4- Fondo
- 5- Velcri



La linea Optima è indicata per il trattamento di alterazioni della morfologia del piede.

Optima Molliter S.r.l. dichiara che i tutori Optima sono dispositivi medici concepiti e progettati secondo lo stato dell'arte, sono stati controllati e resi conformi al Regolamento UE 2017/745 per le parti applicabili. I tutori sono conformi alle linee guida internazionali del IWGDF per la gestione delle ulcere del piede diabetico. <https://iwgdfguidelines.org/guidelines/guidelines>.

INDICATO PER

- Gestione dell'ulcera del tallone (sia plantare che dorsale).
- Ulcera / ferita del tendine d'Achille.
- Ulcera da decubito del tallone (sia plantare che dorsale).
- Riabilitazione post-operatoria del tallone/tendine d'Achille.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tutore gamba-piede alto con apertura al tallone con componenti predisposti adattabili al paziente, tomaia traspirante e lavabile, soletto rigido antiflessione, fondo Fully Rocking con controllo del movimento e redistribuzione del carico pressorio.

Unico tutore alto in commercio per la gestione dell'ulcera al tallone.

CARATTERISTICHE

MATERIALI UTILIZZATI:

GAMBALE: PU 70% + PES 20% + COT 10%

FODERE POLIESTERE: 100%

SOLETTO: POLIAMMIDE PA6 70% + FIBRA VETRO 30%

FONDO: POLIURETANO

CALZA PROTETTIVA: 90% COTONE, 7% POLIAMMIDE, 3% ELASTAM.

I PRODOTTI OPTIMA SONO LATEX FREE.

CHIUSURA: 4 VELCRI

PACKAGING: PESO: GR 205 / MATERIALE: CARTONE

TEMPERATURE OPERATIVE E DI STOCCAGGIO: - 5° | + 45°

LOTTO DI PRODUZIONE: COME DESCRITTO SULL'ETICHETTA DEL FRONTALINO DELLA SCATOLA

COMPONENTI BASE: 1 PLANTARE OPTIMA KITCLHEEL

AGGIUNTIVI: PLANTARE PLTM / PLANTARE MONOBLOCCO / CALZA PROTETTIVA

PULIZIA DEL PRODOTTO

Per la pulizia del prodotto utilizzare acqua tiepida o fredda, pulire con sapone neutro e risciacquare una volta completata l'operazione.

Evitare qualunque liquido aggressivo come alcool, detersivi da bucato, candeggina, ammoniaca, solventi. Evitare l'utilizzo di materiali abrasivi come spazzole, lana d'acciaio, carta vetro e lame di coltello per l'eliminazione delle macchie.

La ditta Optima Molliter S.r.l. non è responsabile di danni provocati da prodotti abrasivi che aggrediscono i materiali e da esposizione diretta a fonti di calore.

TAGLIANDO VERTICALMENTE IL
GAMBALE NELL'AREA POSTERIORE
SI OTTIENE UN TUTORE BI-VALVA. SI
RACCOMANDA LA STABILIZZAZIONE
CON GLI STRAP IN DOTAZIONE.



CODICE DI REPERTORIO / DISPOSITIVI MEDICI 2346527


N.Tariffario 06.12.06.033

In conformità con le Raccomandazioni 5-6-7a-7b-7c-8 delle Linee Guida Internazionali dell'IWGDF sulla gestione del piede diabetico.

<https://iwgdfguidelines.org/guidelines/guidelines>

TAGLIE

	S 34-36	M 37-39	L 40-42	XL 43-45	XXL 46-48
A MM.	247	267	288	316	336
B MM.	101	108	115	119	131
C MM.	258	270	278	295	305
PESO GR. senza plantare	414	490	548	667	820

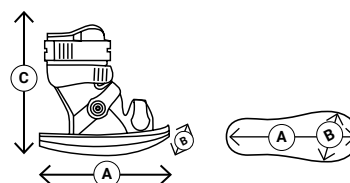

Optima Molliter Srl

Company Certified under: ISO 9001:2015 IT346378 - ISO 13485:2016 IT346377

Via Breda 19/21 62012 Civitanova Marche (MC) Italy T +39 0733 801060

info@optimamolliter.com / www.yda.it / www.optimamolliter.com

