

SCHEDA TECNICA

SBI MOTUS

TUTORE GAMBA-PIEDE ALTO

Trattamento per la stabilizzazione del piede e della caviglia.

COMPONENTI DEL PRODOTTO

- 1- Tomaia morbida / Protezione tibiale morbida
- 2- AFO Unità principale
- 3- Pulsanti di sblocco
- 4- NRS Sistema di Non Removibilità
- 5- Cinturino a Strap
- 6- Rinforzo tibiale semi rigido
- 7- Fibbie
- 8- Punti di blocco suola anteriori
- 9- Suola Fully Rocking



La linea SBI è indicata per il trattamento di alterazioni della morfologia del piede.

La ditta Optima Molliter S.r.l. dichiara che i tutori SBI sono dispositivi medici concepiti e progettati secondo lo stato dell'arte, sono stati controllati e resi conformi al Regolamento UE 2017/ 745 per le parti applicabili. I tutori sono conformi alle linee guida internazionali del IWGDF per la gestione delle ulcere del piede diabetico. <https://iwgdfguidelines.org/guidelines/guidelines>.

INDICATO PER

- Trattamento del trauma di caviglia e piede.
- Trattamento post-operatorio della ferita plantare.
- Ulcera diabetica plantare - Ulcera plantare.
- Riabilitazione post-amputazione minore (eccetto amputazioni Lisfranc e Chopart).
- Nella fase acuta, se reso irremovibile con sistema NRS, come 2° opzione della gestione del piede di Charcot.
- Nella fase acuta, removibile, come 3° opzione della gestione del piede di Charcot.
- Gestione del piede di Charcot nella fase di conversione da acuto a cronico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sistema di stabilizzazione 100% customizzabile, composto da elementi anatomici, termo-modellabili, traspiranti, removibili, lavabili e sostituibili. Fodera anatomica, morbida, protettiva e regolabile. Protezione tibiale bicomponente (morbida + semi-rigida). Scocca rigida stabilizzante Suola Rocker removibile per la conversione dalla fase acuta alla fase cronica (accessorio opzionale) dello Charcot Foot.

CARATTERISTICHE

MATERIALI UTILIZZATI:

PROTEZIONE TIBIALE SEMI RIGIDA E FIBBIE: TPU/TOMAIA

PROTEZIONE TIBIALE MORBIDA E PLANTARI: E.V.A.

AFO ED AFO OPEN: PP

VITI: ACCIAIO ZINCATO / DADI: FERRO ZINCATO

SUOLA: E.V.A. + NYLON / VELCRO: POLIAMMIDE + POLIESTERE

CALZA PROTETTIVA: 90% COTONE, 7% POLIAMMIDE, 3% ELASTAM.

I PRODOTTI SBI SONO LATEX FREE.

CHIUSURA: 4 VELCRI.

PACKAGING: PESO: GR 106 / MATERIALE: CARTONE + SACCHETTO IN NYLON

TEMPERATURE OPERATIVE E DI STOCCAGGIO: - 5° | + 45°

LOTTO DI PRODUZIONE: COME DESCRITTO SULL'ETICHETTA DEL FRONTALINO DELLA SCATOLA

COMPONENTI BASE: PLANTARE SBI 3X3 / NRS SYSTEM / CALZA PROTETTIVA.

AGGIUNTIVI: ROCKER SOLE / PLANTARE PLTM / PLANTARE MONOBLOCCO

PULIZIA DEL PRODOTTO

La pulizia del prodotto va così eseguita: Supporto rigido (2): in lavastoviglie (temperatura massima 45°) o a mano utilizzando sapone neutro e risciacquo con acqua fredda. Rivestimenti morbidi (1), suola (9-10), rinforzo tibiale (6): utilizzare acqua fredda e pulire con sapone neutro, risciacquare una volta completata l'operazione. Cinghie (5), fibbie (7), calza (13): lavatrice in acqua fredda. Bottoni a vite (11), elementi dado (12): una volta rimossi, vanno puliti con un panno morbido ed apposito prodotto per pulizia acciaio zincato (bottoni a vite) ed apposito prodotto per ferro zincato (elementi dado). Evitare qualunque liquido aggressivo come alcool, candeggina, ammoniaca, solventi, perossidi e sbiancanti ottici. Evitare l'utilizzo di gomme abrasive, come spazzole, lana d'acciaio, carta vetro e lame di coltello per l'eliminazione delle macchie. La ditta Optima Molliter S.r.l. non è responsabile di danni provocati da prodotti abrasivi che aggrediscono i materiali e da esposizione diretta a fonti di calore. Asciugare a mano con panno morbido o all'aria lontano da fonti di calore e sole diretto. Non utilizzare asciugatori o macchine asciugatrici.

CODICE DI REPERTORIO 2346544


N.Tariffario 06.12.06.030

Dispositivo medico di Classe I secondo il Regolamento (UE) 2017/745

In conformità con le Raccomandazioni 1a-1b-2-5-6-7a-7b-7c-9; Charcot Foot, e conversione da fase acuta a cronica delle Linee Guida Internazionali dell'IWGDF sulla gestione dell'ulcera diabetica plantare. <https://iwgdfguidelines.org/guidelines/guidelines>

TAGLIE

	S 34-36	M 37-39	L 40-42	XL 43-45	XXL 46-48
A MM.	265	285	308	330	350
B MM.	118	125	138	143	148
C MM.	325	336	350	360	370
PESO GR. senza plantare	815	915	1073	1209	1335

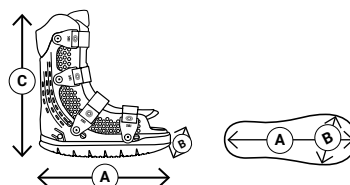

Optima Molliter Srl

Company Certified under: ISO 9001:2015 IT346378 - ISO 13485:2016 IT346377

Via Breda 19/21 62012 Civitanova Marche (MC) Italy T +39 0733 801060

info@optimamolliter.com / www.yda.it / www.optimamolliter.com

