

SCHEMA TECNICA IRIS



TECNOLOGIA

- 1 PLANTARE ESTRAIBILE
- 2 CHIUSURE REGOLABILI
- 3 TACCO LARGO STABILIZZANTE
- 4 ASSENZA DI CUCITURE NELLE ZONE DI SFREGAMENTO
- 5 TOMAIA AUTOMODELLANTE PER ALLUCE VALGO E ALTRE DEFORMITÀ



TQURA è una nuova linea di sneakers funzionali progettate per offrire un sostegno ideale a chi soffre di lievi algie o problematiche del piede. Indicate per il benessere e la prevenzione primaria, la protezione del piede ed il defaticamento. Optima Molliter Srl dichiara che le calzature TQURA sono dispositivi medici e possono essere utilizzati a scopo contenitivo di plantari personalizzati o su misura. TQURA fa parte del Programma Salute Optima Molliter. Tutte le calzature e i dispositivi vengono testati nei migliori Istituti e certificati. Scegliendo TQURA, si abbraccia uno stile di vita consapevole ed orientato al benessere. La nostra vision è di rendere le persone libere di muoversi nel proprio mondo.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

- Defaticamento e benessere.
- Piede sensibile e/o reumatico.
- Lievi deformità (alluce valgo o varo/dita a martello etc.).
- Prevenzione e gestione di traumi ungueali.
- Riabilitazione post-trauma e/o post-chirurgia minore dell'avampiede.
- Algie plantari (metatarsalgia, tallonite, fascite, spina calcaneare etc.).
- Rieducazione del piede per biomeccanica e postura.
- Poliartrite, neuroma di Morton, artrosi, osteoartrite se utilizzata con plantare su misura.
- Piede diabetico, non a rischio, Rischio 0, Rischio 1* (+ plantare su misura), Rischio 2* (+ plantare su misura);
*solo per gli articoli della linea con fondo Semirigido.

CARATTERISTICHE

SUOLA: TPR ANTISLIP
INTERSUOLA: PLANTARE ESTRAIBILE
SOTTOPIEDE: PELLE SCAMOSCIATA
ALTEZZA TACCO FORMA: 5 MM
DROP SUOLA: 10 MM
TOMAIA: PELLE SCAMOSCIATA E MICROFIBRA STRETCH
FODERA: TESSUTO IMBOTTITO
ALLACCIATURA: DOPPIO VELCRO REGOLABILE
PESO MEDIO CALZATURA TAGLIA 37: Gr. 200
TAGLIA - CALZATA: 37 - FIT 13.5/14 REGOLABILE

PULIZIA DEL PRODOTTO

La pulizia del prodotto va eseguita come descritto:



- la calzatura NON va assolutamente lavata per immersione, sotto getto d'acqua o in lavatrice.
- per la tomaia in tessuto tecnico utilizzare un panno leggermente inumidito con acqua e sapone neutro, strofinare con delicatezza e lasciar asciugare;
- per le tomaie in pelle utilizzare apposite creme (idratante-lucidante) specifiche per la tipologia di pellame da trattare ed approvate dalla CEE, spalmate e lucidate con panno pulito, asciutto, morbido e non abrasivo;
- nel caso di scamosciati o similari utilizzare solo spazzole o panni morbidi e solo a pelle asciutta per togliere le eventuali macchie (fango e simili);
- assicurarsi di eseguire una regolare idratazione del pellame applicando apposite creme, specialmente nel caso di pelli particolarmente morbide quali nappe, cervi e cervati;
- non utilizzare liquidi alcolici, liquidi abrasivi, detergenti, alcool, detersivi da bucato, candeggina, ammoniac, solventi;
- non utilizzare materiali e/o prodotti abrasivi, spazzole, lana d'acciaio, carta vetro, lame o similari, per l'eliminazione di macchie o residui;
- per la superficie inferiore laterale della suola usare spugne morbide inumidite in acqua tiepida, massimo 30 C° e sapone neutro;
- se il prodotto si fosse accidentalmente inumidito, lasciare asciugare all'aria, lontano da fonti di calore e in ambiente non umido. Non asciugare assolutamente il prodotto umido o bagnato davanti a fonti di calore: ciò potrebbe comportare un inevitabile danno alla calzatura con conseguente perdita di garanzia.

La ditta Optima Molliter S.r.l. NON è responsabile di danni provocati da prodotti abrasivi, da prodotti che aggrediscono i materiali, da esposizione diretta a fonti di calore e uso/manutenzione impropria.

NR. REPERTORIO MINISTERO SALUTE: 2437295 / Dispositivo medico di Classe I secondo il Regolamento (UE) 2017/745

TAGLIE

	35	36	37	38	39	40	41
A	21,76	22,43	23,10	23,77	24,44	25,11	25,78
B	7,40	7,55	7,70	7,85	8,00	8,15	8,30
C	23,80	24,25	24,70	25,15	25,60	26,05	26,50

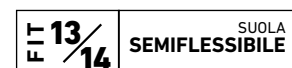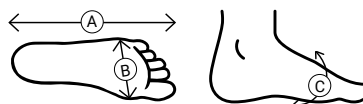

Optima Molliter Srl
Company Certified under: ISO 9001:2015 IT346378 - ISO 13485:2016 IT346377
Via Breda 19/21 62012 Civitanova Marche (MC) Italy T +39 0733 801060
info@optimamolliter.com / www.yda.it / www.optimamolliter.com

