

SCHEDA TECNICA YDA / SOIL



TECHNOLOGY

1. CONTRAFFORTE STABILIZZANTE
 2. FODERA PROTETTIVA
 3. COMFORT E RESISTENZA TERMICA
 4. PELLE MORBIDA
 5. PUNTA RINFORZATA E INTERNI PROTETTIVI
 6. CHIUSURE REGOLABILI
 7. ROCKER SOLE BIOMECCANICA ANTISCIVOLO
 8. PUNTO DI ROTOLAMENTO ANTICIPATO
- SPRING SYSTEM PROPULSION
PLANTARE REMOVIBILE ANTISHOCK



La sneakers YDA stimola la muscolatura e il microcircolo, migliora la postura, protegge il piede dalle lesioni e dai dolori più comuni. La tecnologia e la costruzione che caratterizzano la linea la rendono un prodotto di alte performances in termini biomeccanici, grazie alla propulsione ed alla stabilità del movimento.

YDA fa parte del Programma Salute Optima Molliter ed è in conformità con le Linee Guida Internazionali dell'IWGDF sulla gestione del piede diabetico. Tutte le calzature e i dispositivi vengono testati nei migliori Istituti e certificati. Scegliendo YDA, abbraccia uno stile di vita consapevole ed orientato al benessere. La nostra vision è di rendere le persone libere di muoversi nel proprio mondo.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

- Algie plantari (metatarsalgia, tallonite, fascite, spina calcaneare etc.).
- Poliartrite, neuroma di Morton, artrosi, osteoartrite se utilizzata con plantare su misura.
- Defaticamento e benessere.
- Rieducazione del piede per biomeccanica e postura.
- Instabilità moderata.
- Lievi deformità (alluce valgo o varo/dita a martello etc.).
- Riabilitazione post-trauma, post-chirurgia minore dell'avampiede (alluce valgo, dita a martello) sino a stabilizzazione, dopo uso di tutore.
- Controlaterale a tutore.
- Piede edematoso.
- Coadiuvante al ritorno venoso anche indicata in abbinamento a calze elastiche a compressione graduata.
- Indicata per inserimento di plantari su misura, molle o tutori per la deambulazione.
- Piede diabetico, non a rischio, rischio 0; rischio 1, 2*, 3*; *in associazione a plantare su calco realizzato dal TO abilitato. Rischio 0 (piede non evidente, basso rischio). Rischio 1 (piede neuropatico, basso rischio). Rischio 2 (interazione rischiosa, basso rischio). Rischio 3 (rischio elevato).
- Obesità.

CARATTERISTICHE

SUOLA: EVA CON INSERTI IN GOMMA E INSERTO INTERNO IN POLIPROPILENE

INTERSUOLA: SOLETTA AMMORTIZZANTE

SOTTOPIEDE INTERNO: GOMMASCHiuma MEMORY FOAM

ALTEZZA TACCO FORMA: 15 MM

DROP SUOLA: 8 MM

TOMAIA: PELLE

FODERA: TESSUTO MESH TRASPIRANTE

LINGUETTA: PELLE

SPUGNA LINGUA: GOMMAPIUMA

SPUGNA COLLETO: GOMMAPIUMA

CONTRAFFORTE: NYLON AUTOMODELLATO

SPUGNA CONTRAFFORTE: GOMMAPIUMA

RINFORZI: LANAVETRO

PUNTALE: NYLON EFFETTO REBOUND

ALLACCIATURA: DOPPIO VELCRO REGOLABILE

PESO MEDIO CALZATURA TAGLIA 37: Gr. 300

PESO MEDIO CALZATURA TAGLIA 41: Gr. 300

TAGLIA - CALZATA: 41 FIT 11

PULIZIA DEL PRODOTTO

La pulizia del prodotto va eseguita come descritto:


- la calzatura NON va assolutamente lavata per immersione, sotto getto d'acqua o in lavatrice.
- per la tomaia in tessuto tecnico utilizzare un panno leggermente inumidito con acqua e sapone neutro, strofinare con delicatezza e lasciar asciugare;
- per le tomaie in pelle utilizzare apposite creme (idratante-lucidante) specifiche per la tipologia di pellame da trattare ed approvate dalla CEE, spalmate e lucidate con panno pulito, asciutto, morbido e non abrasivo;
- nel caso di scamosciati o similari utilizzare solo spazzole o panni morbidi e solo a pelle asciutta per togliere le eventuali macchie (fango e simili);
- assicurarsi di eseguire una regolare idratazione del pellame applicando apposite creme, specialmente nel caso di pelli particolarmente morbide quali nappe, cervi e cervati;
- non utilizzare liquidi alcolici, liquidi abrasivi, detergenti, alcool, detersivi da bucato, candeggina, ammoniaca, solventi;
- non utilizzare materiali e/o prodotti abrasivi, spazzole, lana d'acciaio, carta vetro, lame o similari, per l'eliminazione di macchie o residui;
- per la superficie inferiore laterale della suola usare spugne morbide inumidite in acqua tiepida, massimo 30°C e sapone neutro;
- se il prodotto si fosse accidentalmente inumidito, lasciare asciugare all'aria, lontano da fonti di calore e in ambiente non umido. Non asciugare assolutamente il prodotto umido o bagnato davanti a fonti di calore: ciò potrebbe comportare un inevitabile danno alla calzatura con conseguente perdita di garanzia.

La ditta Optima Molliter S.r.l. NON è responsabile di danni provocati da prodotti abrasivi, da prodotti che aggrediscono i materiali, da esposizione diretta a fonti di calore e uso/manutenzione impropria.

NR. REPERTORIO MINISTERO SALUTE: 2346431 / Dispositivo medico di Classe I secondo il Regolamento (UE) 2017/745

TAGLIE

	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
A	23,36	24,03	24,70	25,37	26,04	26,63	27,30	27,97	28,64	29,31	29,98	30,65	31,32
B	8,20	8,35	8,50	8,65	8,80	8,95	9,10	9,25	9,40	9,55	9,70	9,85	10,00
C	23,10	23,55	24,00	24,45	24,90	25,35	25,80	26,25	26,70	27,15	27,60	28,05	28,50

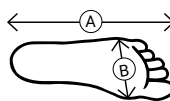

EU 11	SUOLA SEMIRIGIDA
-------	------------------

Optima Molliter Srl

Company Certified under: ISO 9001:2015 IT346378 - ISO 13485:2016 IT346377

Via Breda 19/21 62012 Civitanova Marche (MC) Italy T +39 0733 801060

info@optimamolliter.com / www.yda.it / www.optimamolliter.com

