

SCHEDA TECNICA

YDA / VAULT YDAW15 ONE WR

WATER RESISTANT

YDA

TECHNOLOGY

1. CONTRAFFORTE STABILIZZANTE E IMBOTTITO
 2. FODERA TRASPIRANTE
 3. TESSUTO TECNICO WATER RESISTANT
 4. EASY-LACE
 5. ROCKER SOLE BIOMECCANICA
 6. PUNTO DI ROTOLAMENTO ANTICIPATO
 7. GRIP ANTISCIVOLO
- PLANTARE REMOVIBILE ANTISHOCK
INTERSUOLA CON BIOGELLY SYSTEM SHOCK ABSORBING AL
TALLONE SPRING SYSTEM PROPULSION
FIT OTTIMIZZATO



La sneakers YDA stimola la muscolatura e il microcircolo, migliora la postura, protegge il piede dalle lesioni e dai dolori più comuni. La tecnologia e la costruzione che caratterizzano la linea la rendono un prodotto di alte performances in termini biomeccanici, grazie alla propulsione ed alla stabilità del movimento.

YDA fa parte del Programma Salute Optima Molliter ed è in conformità con le Linee Guida Internazionali dell'IWGDF sulla gestione del piede diabetico. Tutte le calzature e i dispositivi vengono testati nei migliori Istituti e certificati. Scegliendo YDA, abbraccia uno stile di vita consapevole ed orientato al benessere. La nostra vision è di rendere le persone libere di muoversi nel proprio mondo.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

- Algie plantari (metatarsalgia, tallonite, fascite, spina calcaneare etc.).
- Poliartrite, neuroma di Morton, artrosi, osteoartrite se utilizzata con plantare su misura.
- Defaticamento e benessere.
- Rieducazione del piede per biomeccanica e postura.
- Instabilità moderata.
- Lievi deformità (alluce valgo o varo/dita a martello etc.).
- Riabilitazione post-trauma, post-chirurgia minore dell'avampiede (alluce valgo, dita a martello) sino a stabilizzazione, dopo uso di tutore.
- Controlaterale a tutore.
- Piede edematoso.
- Coadiuvante al ritorno venoso anche indicata in abbinamento a calze elastiche a compressione graduata.
- Indicata per inserimento di plantari su misura, molle o tutori per la deambulazione.
- Piede diabetico, non a rischio, rischio 0; rischio 1, 2*, 3*;
*in associazione a plantare su calco realizzato dal TO abilitato.
Rischio 0 (piede non evidente, basso rischio).
Rischio 1 (piede neuropatico, basso rischio).
Rischio 2 (interazione rischiosa, basso rischio).
Rischio 3 (rischio elevato).
- Obesità.

CARATTERISTICHE

SUOLA: EVA CON INSERTI IN GOMMA E INSERTO INTERNO IN POLIPROPILENE
INTERSUOLA: BIOGEL SISTEM AMMORTIZZANTE
SOTTOPIEDE INTERNO: GOMMASCHIUMA MEMORY FOAM
ALTEZZA TACCO FORMA: 15 MM
DROP SUOLA: 8 MM
TOMAIA: TESSUTO IDROREPELLENTE CON INSERTI IN TU
TALLONE: PELLE SCAMOSCIATA
FODERA: TESSUTO MESH TRASPIRANTE
LINGUETTA: TESSUTO IDROREPELLENTE
SPUGNA LINGUA: GOMMAPIUMA
SPUGNA COLLETO: GOMMAPIUMA
CONTRAFFORTE: NYLON AUTOMODELLATO
SPUGNA CONTRAFFORTE: GOMMAPIUMA
RINFORZI: LANAVETRO
PUNTALE: NYLON EFFETTO REBOUND
ALLACCIATURA: EASYLACE
PESO MEDIO CALZATURA TAGLIA 37: Gr. 400
PESO MEDIO CALZATURA TAGLIA 41: Gr. 400
TAGLIA - CALZATA: 41 FIT 11

PULIZIA DEL PRODOTTO

La pulizia del prodotto va eseguita come descritto:


- la calzatura NON va assolutamente lavata per immersione, sotto getto d'acqua o in lavatrice.
- per la tomaia in tessuto tecnico utilizzare un panno leggermente inumidito con acqua e sapone neutro, strofinare con delicatezza e lasciar asciugare;
- per le tomaie in pelle utilizzare apposite creme (idratante-lucidante) specifiche per la tipologia di pellame da trattare ed approvate dalla CEE, spalmate e lucidate con panno pulito, asciutto, morbido e non abrasivo;
- nel caso di scamosciati o similari utilizzare solo spazzole o panni morbidi e solo a pelle asciutta per togliere le eventuali macchie (fango e simili);
- assicurarsi di eseguire una regolare idratazione del pellame applicando apposite creme, specialmente nel caso di pelli particolarmente morbide quali nappe, cervi e cervati;
- non utilizzare liquidi alcolici, liquidi abrasivi, detergenti, alcool, detersivi da bucato, candeggina, ammoniaca, solventi;
- non utilizzare materiali e/o prodotti abrasivi, spazzole, lana d'acciaio, carta vetro, lame o similari, per l'eliminazione di macchie o residui;
- per la superficie inferiore laterale della suola usare spugne morbide inumidite in acqua tiepida, massimo 30 C° e sapone neutro;
- se il prodotto si fosse accidentalmente inumidito, lasciare asciugare all'aria, lontano da fonti di calore e in ambiente non umido. Non asciugare assolutamente il prodotto umido o bagnato davanti a fonti di calore: ciò potrebbe comportare un inevitabile danno alla calzatura con conseguente perdita di garanzia.

La ditta Optima Molliter S.r.l. NON è responsabile di danni provocati da prodotti abrasivi, da prodotti che aggrediscono i materiali, da esposizione diretta a fonti di calore e uso/manutenzione impropria.

NR. REPERTORIO MINISTERO SALUTE: 2346431 / Dispositivo medico di Classe I secondo il Regolamento (UE) 2017/745

TAGLIE

	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
A	23,36	24,03	24,70	25,37	26,04	26,63	27,30	27,97	28,64	29,31	29,98	30,65	31,32
B	8,20	8,35	8,50	8,65	8,80	8,95	9,10	9,25	9,40	9,55	9,70	9,85	10,00
C	23,10	23,55	24,00	24,45	24,90	25,35	25,80	26,25	26,70	27,15	27,60	28,05	28,50

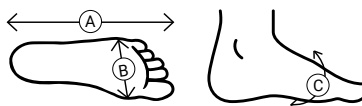

EU 11	SUOLA SEMIRIGIDA
-------	------------------

Optima Molliter Srl

Company Certified under: ISO 9001:2015 IT346378 - ISO 13485:2016 IT346377
Via Breda 19/21 62012 Civitanova Marche (MC) Italy T +39 0733 801060
info@optimamolliter.com / www.yda.it / www.optimamolliter.com

