

# SCHEDA TECNICA YDA PRO / MAS

YDA<sup>PRO</sup>

## TECHNOLOGY

1. CONTRAFFORTE STABILIZZANTE E IMBOTTITO
  2. TOMAIA CON FODERA INTERNA TOTAL COMFORT
  3. TESSUTO TECH TRASPIRANTE
  4. ROCKER SOLE ULTRALIGHT CON INSERTI ANTISCIVOLO
  5. PUNTO DI ROTOLAMENTO ANTICIPATO
- PRO EXTRA FIT CON AMPIA VESTIBILITÀ  
PLANTARE REMOVIBILE ANTISHOCK  
INTERSUOLA RIGIDA RICOPERTA CON D-COVER RIDISTRIBUISCE I CARICHI PRESSORI  
FONDO SPRINGSYSTEM® PRO PER PERFORMANCE PROPULSIVE



**YDA PRO** con suola **rigida** propulsiva, è l'articolo più versatile dell'intera gamma YDA. Nasce dal potenziamento della tecnologia YDA per massimizzare stabilità, controllo attivo del movimento e garantire un fit estremamente confortevole. Studiata per accelerare il defaticamento post performance e per la riattivazione continua del microcircolo durante la camminata, la tecnologia YDA PRO assicura la redistribuzione costante dei carichi pressori plantari e la massima protezione di tendine, tallone e colonna vertebrale, grazie all'assorbimento degli shock da atterraggio. YDA fa parte del Programma Salute Optima Molliter ed è in conformità con le Linee Guida Internazionali dell'IWGDF sulla gestione del piede diabetico. Tutte le calzature e i dispositivi vengono testati nei migliori Istituti e certificati. Scegliendo YDA, abbraccia uno stile di vita consapevole ed orientato al benessere. La nostra vision è di rendere le persone libere di muoversi nel proprio mondo.

## INDICAZIONI TERAPEUTICHE

- Algie plantari (metatarsalgia, tallonite, fascite, spina calcaneare etc.).
- Poliartrite, neuroma di Morton, artrosi, osteoartrite se utilizzata con plantare su misura.
- Defaticamento e benessere.
- Rieducazione del piede per biomeccanica e postura.
- Instabilità moderata.
- Lievi deformità (alluce valgo o varo/dita a martello etc.).
- Riabilitazione post-trauma, post-chirurgia minore dell'avampiede (alluce valgo, dita a martello) sino a stabilizzazione, dopo uso di tutore.
- Controlaterale a tutore.
- Piede edematoso.
- Coadiuvante al ritorno venoso anche indicata in abbinamento a calze elastiche a compressione graduata.
- Indicata per inserimento di plantari su misura, molle o tutori per la deambulazione.
- Piede diabetico, non a rischio, rischio 0; rischio 1, 2\*, 3\*;  
\*in associazione a plantare su calco realizzato dal TO abilitato.
- Rischio 0 (piede non evidente, basso rischio).
- Rischio 1 (piede neuropatico, basso rischio).
- Rischio 2 (interazione rischiosa, basso rischio).
- Rischio 3 (rischio elevato)
- Piede di Charcot.
- Obesità.

## CARATTERISTICHE

**SUOLA:** EVA CON INSERTI IN GOMMA E INSERTO INTERNO IN POLIPROPILENE  
**INTERSUOLA:** SOLETTA AMMORTIZZANTE  
**SOTTOPIEDE INTERNO:** GOMMASCHIUMA MEMORY FOAM  
**ALTEZZA TACCO FORMA:** 15 MM  
**DROP SUOLA:** 8 MM  
**TOMAIA:** NYLON ACCOPPIATO E PELLE SCAMOSCIATA  
**FODERA:** TESSUTO MESH TRASPIRANTE  
**LINGUETTA:** NYLON ACCOPPIATO  
**SPUGNA LINGUA:** GOMMAPIUMA  
**SPUGNA COLLETO:** GOMMAPIUMA  
**CONTRAFFORTE:** NYLON AUTOMODELLATO  
**SPUGNA CONTRAFFORTE:** GOMMAPIUMA  
**RINFORZI:** LANAVETRO  
**PUNTALE:** NYLON EFFETTO REBOUND  
**ALLACCIATURA:** LACCIO MODELLANTE  
**PESO MEDIO CALZATURA TAGLIA 37:** Gr. 300  
**PESO MEDIO CALZATURA TAGLIA 41:** Gr. 400  
**TAGLIA - CALZATA:** 41 FIT 12

## PULIZIA DEL PRODOTTO

La pulizia del prodotto va eseguita come descritto:


- la calzatura **NON** va assolutamente lavata per immersione, sotto getto d'acqua o in lavatrice.
- per la tomaia in tessuto tecnico utilizzare un panno leggermente inumidito con acqua e sapone neutro, strofinare con delicatezza e lasciar asciugare;
- per le tomaie in pelle utilizzare apposite creme (idratante-lucidante) specifiche per la tipologia di pellame da trattare ed approvate dalla CEE, spalmate e lucidate con panno pulito, asciutto, morbido e non abrasivo;
- nel caso di scamosciati o similari utilizzare solo spazzole o panni morbidi e solo a pelle asciutta per togliere le eventuali macchie (fango e simili);
- assicurarsi di eseguire una regolare idratazione del pellame applicando apposite creme, specialmente nel caso di pelli particolarmente morbide quali nappa, cervi e cervati;
- non utilizzare liquidi alcolici, liquidi abrasivi, detergenti, alcool, detersivi da bucato, candeggina, ammoniac, solventi;
- non utilizzare materiali e/o prodotti abrasivi, spazzole, lana d'acciaio, carta vetro, lame o similari, per l'eliminazione di macchie o residui;
- per la superficie inferiore laterale della suola usare spugne morbide inumidite in acqua tiepida, massimo 30 C° e sapone neutro;
- se il prodotto si fosse accidentalmente inumidito, lasciare asciugare all'aria, lontano da fonti di calore e in ambiente non umido. Non asciugare assolutamente il prodotto umido o bagnato davanti a fonti di calore: ciò potrebbe comportare un inevitabile danno alla calzatura con conseguente perdita di garanzia.

La ditta Optima Molliter S.r.l. NON è responsabile di danni provocati da prodotti abrasivi, da prodotti che aggrediscono i materiali, da esposizione diretta a fonti di calore e uso/manutenzione impropria.

NR. REPERTORIO MINISTERO SALUTE: 2346408 / Dispositivo medico di Classe I secondo il Regolamento (UE) 2017/745

## TAGLIE

|   | 35    | 36    | 37    | 38    | 39    | 40    | 41    | 42    | 43    | 44    | 45    | 46    | 47    |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | 23,36 | 24,03 | 24,70 | 25,37 | 26,04 | 26,73 | 27,40 | 28,07 | 28,74 | 29,41 | 30,08 | 30,75 | 31,42 |
| B | 8,20  | 8,35  | 8,50  | 8,65  | 8,80  | 8,95  | 9,10  | 9,25  | 9,40  | 9,55  | 9,70  | 9,85  | 10,00 |
| C | 23,70 | 24,15 | 24,60 | 25,05 | 25,50 | 25,85 | 26,30 | 26,75 | 27,20 | 27,65 | 28,10 | 28,55 | 29,00 |

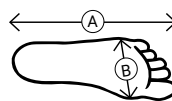

|       |              |
|-------|--------------|
| EU 12 | SUOLA RIGIDA |
|-------|--------------|

## Optima Molliter Srl

Company Certified under: ISO 9001:2015 IT346378 - ISO 13485:2016 IT346377  
Via Breda 19/21 62012 Civitanova Marche (MC) Italy T +39 0733 801060  
info@optimamolliter.com / www.yda.it / www.optimamolliter.com

